



Manuel d'utilisation

Version 4.1



Table des matières

Général.....	5
Fonctionnalités en détails	6
Synthèse vocale	6
Prédiction.....	6
Pavé d'écriture	6
Méthodes d'accès	7
Phrases.....	8
Ajouter une phrase	8
Editer une phrase.....	10
Ajouter une catégorie	11
Editer une catégorie.....	12
Copier/Coller.....	12
Email.....	12
Les réseaux sociaux (Uniquement disponible en mode Accès Direct)	15
Skype (Uniquement disponible sur iPad et iPad mini).....	16
Actualités	18
Message (Uniquement disponible en mode Accès Direct).....	19
Historique.....	20
Imprimer	20
Réglages	21
Méthodes d'Accès.....	21
Accès Direct.....	21
Toucher N'importe Où	21
Balayage	21
Réglages de l'Accès direct	21
Délai de réponse	21
Maintien de la touche	21
Réglages des modes <i>Toucher N'importe Où</i> et <i>Balayage</i>	22
Type de balayage	22
Rapidité du balayage.....	22
Arrêter le balayage.....	22
Sortie Rapide – <i>Activer/Désactiver</i>	23
Connecter votre contacteur et interface Bluetooth à votre appareil iOS	23
Support Audio	24
Simple tape pour sélection	24

Double tape pour sélection.....	24
Voix	25
Options de prononciation	26
Parler après Espace	26
Parler après curseur	26
Surligner en prononçant	26
Effacer après parler.....	26
Publier	26
Prédiction de mots.....	26
Mots auto-appris.....	26
Mots personnalisés (modification prononciation et création d'abréviations)	27
Support à la Dyslexie.....	28
Prédiction des mots en gras.....	28
Disposition	28
Personnalisez vos touches rapides	28
Thème	29
Thème par défaut: pour restaurer les couleurs et opacités par défaut de l'application.	30
Contraste élevé: pour les personnes souffrant de troubles visuels, cette option transforme l'application (y compris les réglages) en noir et blanc pour afficher un contraste élevé.....	30
Inverser les couleurs: Instructions pour activer l'option Apple „Inverser les couleurs“ depuis les réglages de votre appareil.	30
Nuance de gris: Instructions pour activer l'option Apple „Nuance de Gris“ depuis les réglages de votre appareil (uniquement sur iOS8).	30
Options.....	30
Tonalité des touches	30
Sauvegardez l'historique.....	30
Sonnerie d'alerte.....	30
Parler et Afficher Favoris	30
Délais des messages.....	31
Clavier	31
Sauvegarde.....	32
Créer une sauvegarde	32
Gérer vos sauvegarde	32
Exporter/Importer vos sauvegardes	33
Pour plus d'informations	33
A propos de Predictable.....	33
A propos de Therapy Box.....	33

Général

Predictable est une application de communication avec synthèse vocale pour les appareils iOS : iPad, iPhone et iPod. Cette application est conçue pour un large éventail de personnes utilisant un système de Communication Améliorée et Alternative (CAA), y compris les personnes atteintes de maladies neuro-motrices/SLA, paralysie cérébrale et autres personnes souffrant de troubles de la communication.

Predictable est conçue pour donner aux personnes ayant des capacités vocales limitées un outil rapide et facile pour communiquer. Le fonctionnement de Predictable est très simple, les utilisateurs peuvent entrer du texte dans la boîte de dialogue et appuyer sur le haut parleur pour que leur message soit prononcé à voix haute par une voix Nuance ou par la voix Apple iOS.

Les messages peuvent être rapidement construits avec la barre de prédiction de mots ou en utilisant des phrases déjà enregistrées dans des catégories.

Predictable peut être utilisée en *Accès Direct*: en appuyant directement sur l'écran, comme pour toute autre application. Mais également avec deux modes de Balayage : *Toucher n'Importe Où* qui utilise tout l'écran comme un contacteur et le balaye l'écran par colonnes et lignes, et *Balayage*, pour contrôler l'application avec 1 ou 2 contacteurs extérieurs. Cette application est également compatible avec le Contrôle de sélection d'iOS7 et iOS8.



Fonctionnalités en détails

Synthèse vocale

Les utilisateurs de Predictable peuvent prononcer à voix haute n'importe quel texte entré dans la boîte de dialogue que ce soit en mode *Accès Direct*, *Toucher N'importe Où* ou avec le mode *Balayage*. Les utilisateurs peuvent choisir leur voix de synthèse parmi 14 voix Nuance ou la voix iOS de leur appareil. Des émoticônes masculins et féminins, compatibles avec n'importe quelle voix, sont disponibles, reproduisant des expressions humaines pour donner de la vie à vos messages.



Prédiction

Predictable inclus un système de prédiction de mots sophistiqué avec auto apprentissage. La prédiction de mots se base tout d'abord sur les lettres entrées de la boîte de dialogue, puis sur le contexte et la grammaire du mot précédant. L'utilisateur peut alors choisir parmi une prédiction de 6 mots.

La prédiction se calque sur les habitudes de l'utilisateur et va « apprendre » les nouveaux mots utilisés ainsi que le contexte dans lequel ces mots sont utilisés. Le système de prédiction va reconnaître les fautes d'orthographe les plus courantes (ex : le mot « pour » est prédit lorsque le mot « puor » est entré).

Si vous prononcez deux fois la phrase « J'habite à Paris », la troisième fois que vous écrivez « J'habite à » le prochain mot prédit sera « Paris ». Cela réduit le nombre de frappes nécessaires à l'écriture d'un mot, ce qui est très important pour les personnes affectées par un handicap. Le système de prédiction va également apprendre des mots français non standards ou d'autres régions comme le mot québécois « Quessé ».

A	Il	Les	Le	En	La
---	----	-----	----	----	----

Pavé d'écriture

Vous avez, en plus du clavier, la possibilité d'utiliser l'option d'écriture manuelle (uniquement disponible avec le mode *Accès Direct*). Cette option vous permet d'écrire manuellement des lettres et des mots et de les envoyer dans la boîte de dialogue.


Cette option agit exactement comme le clavier et fonctionne avec le système de Prédiction de mots.

Pour accéder à cette fonctionnalité veuillez appuyer sur l'icône suivante depuis le clavier:



Commencez par écrire une ou plusieurs lettres, puis vérifiez si le Pavé d'écriture reconnaît ces caractères dans cellule juste en dessous de la barre de prédiction des mots.

Si les lettres reconnues sont correctes appuyez sur la touche *Entrer* pour sélectionner ce texte. Pour supprimer les lettres entrées appuyez sur la touche *Supprimer*. Pour revenir au clavier appuyez sur le bouton *Clavier* qui apparait dans vos touches rapides.

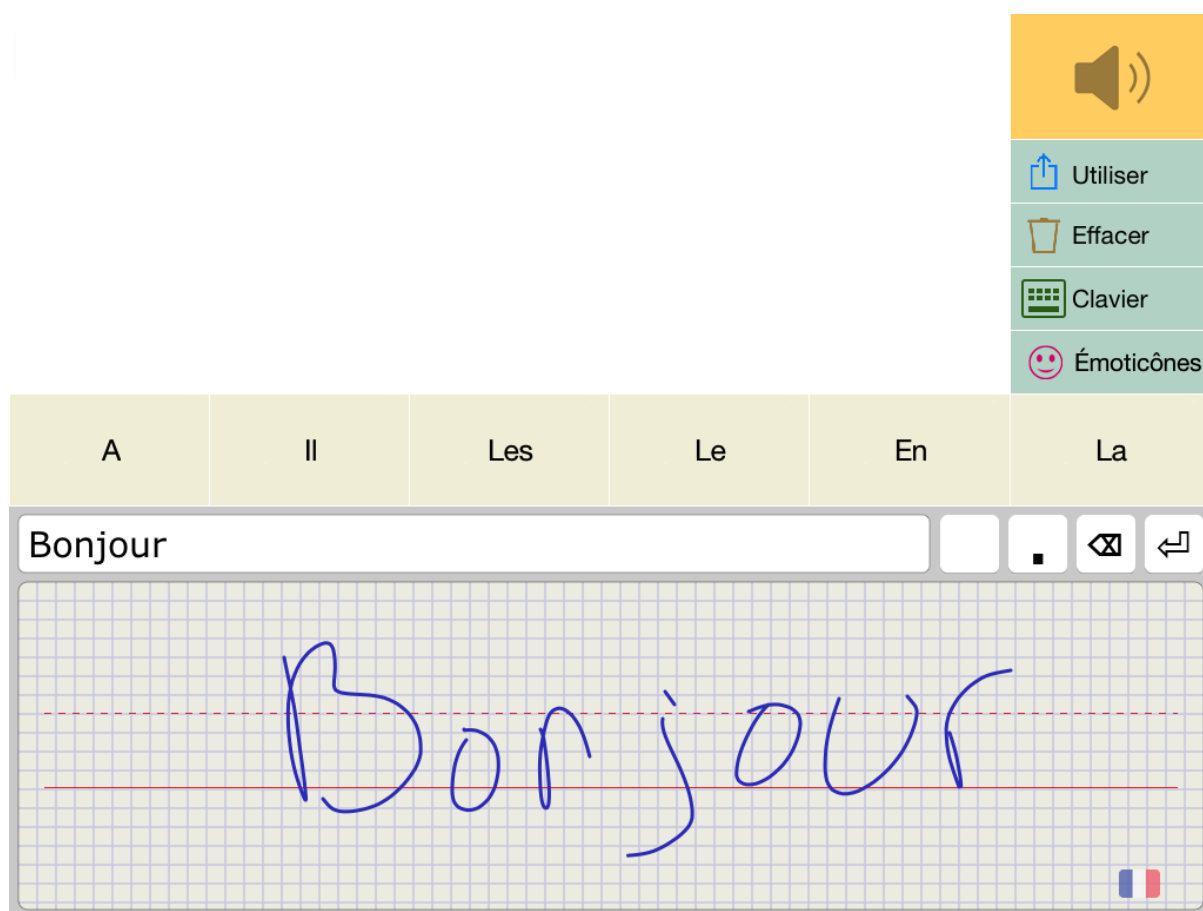

Méthodes d'accès

Vous pouvez choisir entre trois méthodes d'accès différentes pour utiliser Predictable.


- *Accès Direct* : cette option vous permet d'utiliser l'application en touchant simplement l'écran de votre appareil iOS.

- *Toucher N'importe Où* : cette option va scanner votre écran (boîte de dialogue, clavier...). Appuyez n'importe où sur votre écran pour sélectionner la partie éclairée.

- *Balayage*: cette option vous permet de contrôler l'application avec un contacteur extérieur connecté à votre appareil iOS via une interface Bluetooth (interface Bluetooth Therapy Box, RJ Cooper, Zyteq, Spectronics ou Compusult). Veuillez brancher votre contacteur à votre interface Bluetooth et synchroniser votre interface Bluetooth avec votre iPad, iPhone ou iPod Touch. Choisissez ensuite le type de balayage qui vous convient le mieux dans les réglages de l'application. Si vous utilisez un seul contacteur veuillez sélectionner l'option *Balayage Automatique*. Si vous utilisez deux contacteurs, veuillez sélectionner l'option *Balayage Manuel* ce qui vous permettra d'utiliser un contacteur pour la navigation et le second pour la sélection.

Ces trois méthodes d'accès sont indépendantes et ne peuvent pas être activées en même temps. Vous pouvez facilement changer de méthode d'accès dans les réglages.

Pour utiliser le contrôle d'accessibilité d'iOS, laissez l'application en mode Accès Direct et activer le contrôle d'accessibilité dans les réglages de votre appareil iOS.

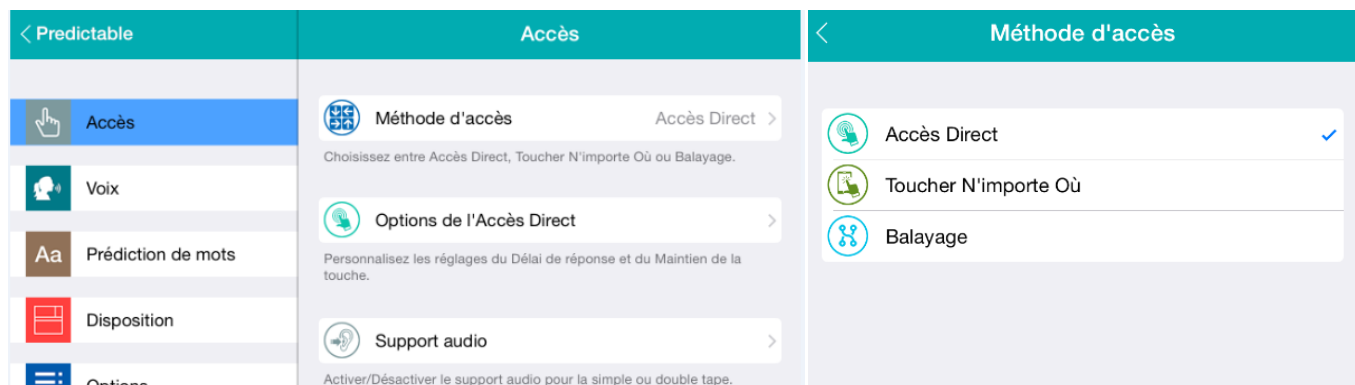

Phrases

Predictable est fournie avec des phrases préinstallées réparties dans différentes catégories. Appuyez sur la touche *Phrase* dans vos touches rapides pour afficher ces catégories à la place du clavier. Vous pouvez facilement éditer ou supprimer ce contenu. Vous pouvez également attribuer une image à vos phrases pour vous aider à reconnaître une phrase en particulier dans votre liste.

Ajoutez de nouvelles phrases depuis vos touches rapides (appuyez sur *Utiliser* puis *Phrase*), depuis votre liste de phrase (sélectionnez *Ajouter une nouvelle phrase* en bas de votre liste), mais également depuis votre historique (cf. rubrique *Historique*).

Ajouter une phrase


Entrez la phrase que vous souhaitez ajouter dans la boîte de dialogue et appuyez sur *Utiliser* dans les touches rapides en haut à droite de votre écran.

1. Appuyez sur la première icône *Phrases*.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre commencez par choisir une ou plusieurs catégories dans laquelle/lesquelles vous souhaitez ajouter cette phrase.




3. Modifiez le texte de votre phrase dans la section *Texte*. Vous avez la possibilité de choisir une abréviation pour votre phrase : cette abréviation apparaîtra dans votre liste de phrases,


mais lorsque vous sélectionnerez cette phrase la totalité de votre message sera visible dans la boîte de dialogue (ex : donnez le titre « Vacances d'été » à un long paragraphe racontant vos vacances).

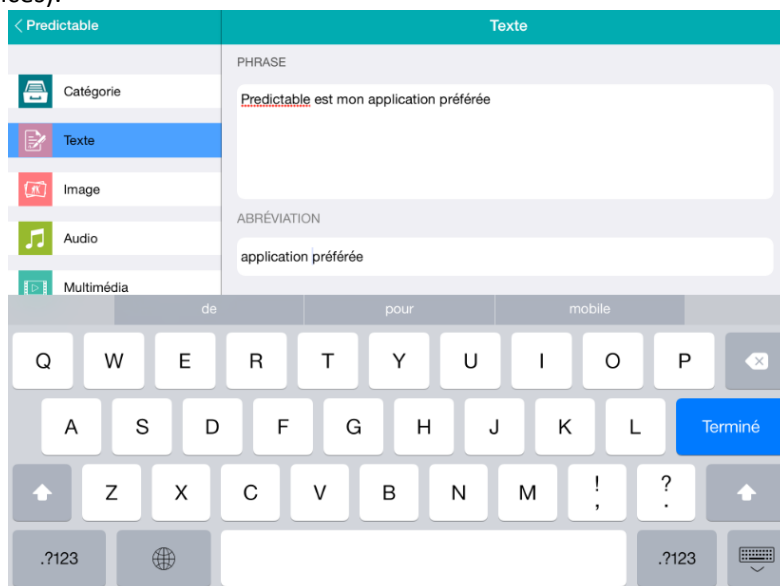


4. Après avoir sélectionné la catégorie et le texte de votre phrase (obligatoires à la création de votre phrase), vous avez la possibilité d'ajouter d'autres composants. Dans la section *Image* sélectionnez une image prise directement depuis l'appareil photo de votre appareil iOS, depuis votre galerie de photos ou dans la bibliothèque d'image de Predictable.

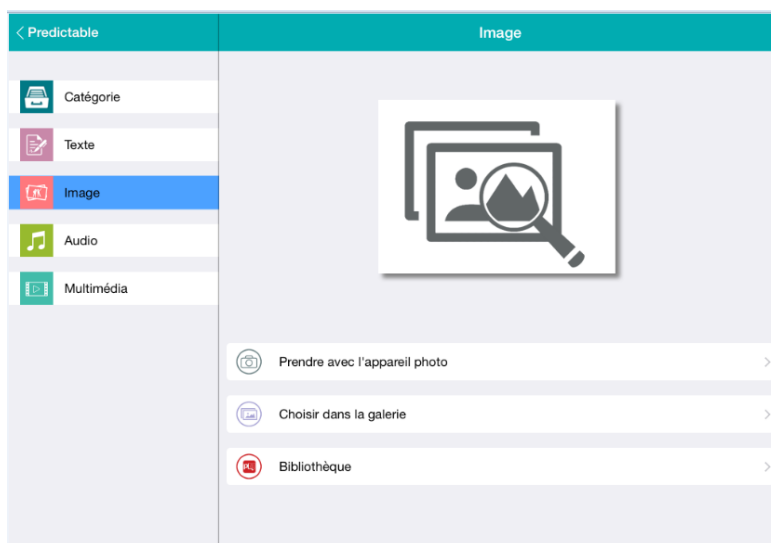

5. Dans la section *Audio*, attribuez à votre phrase l'audio de votre choix parmi : la voix Predictable (voix que vous avez sélectionné dans vos réglages), un enregistrement audio ou un son pris dans la bibliothèque Predictable.

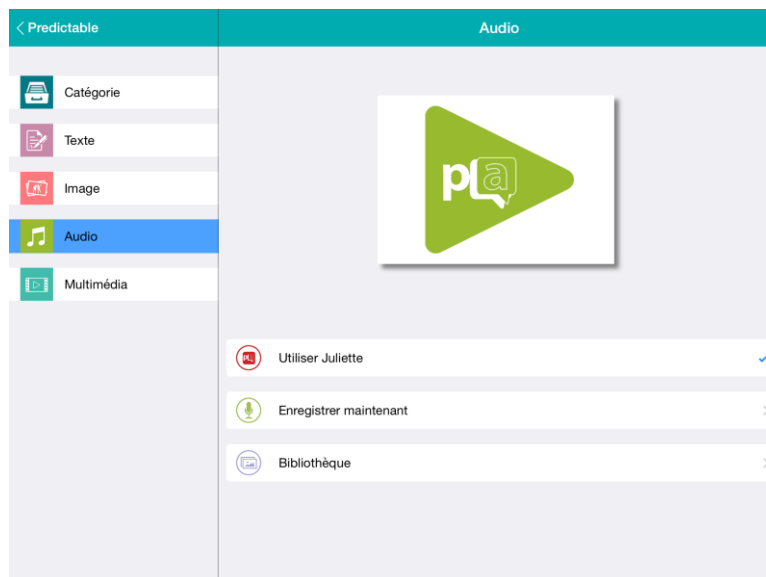

6. Vous pouvez également ajouter un multimédia à votre phrase, qui sera lu lorsque votre phrase sera sélectionnée. Connectée votre phrase à une musique iTunes, une vidéo YouTube ou un site internet.

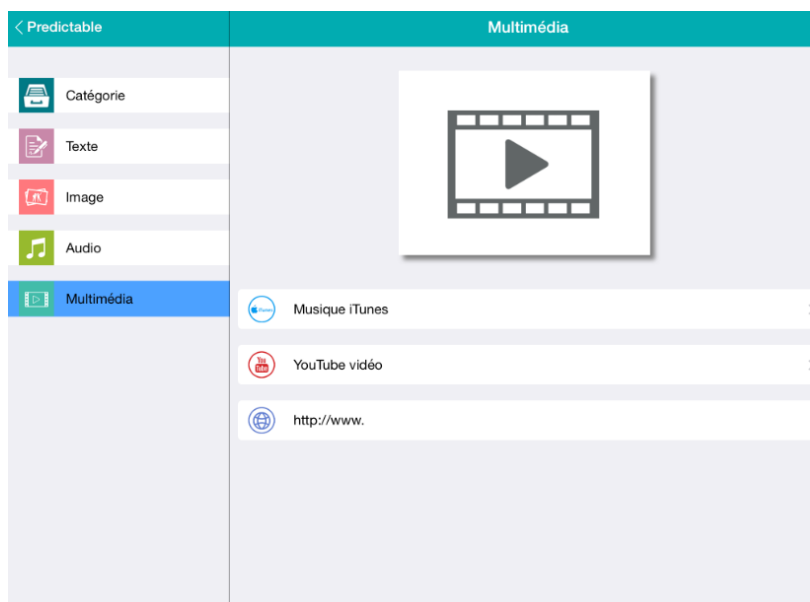

7. Pour ajouter cette nouvelle phrase, appuyez simplement sur le bouton de retour <Predictable et sélectionnez *Oui* dans la fenêtre vous demandant si vous souhaitez enregistrer cette phrase.

Editer une phrase

1. Appuyez sur le bouton ci-dessous (apparaissant en bas de votre écran lorsque vous êtes dans l'une de vos catégories) pour activer le mode d'édition:




2. Si vous souhaitez supprimer une phrase appuyez sur le l'icône *Supprimer* (cercle rouge) se situant juste devant cette phrase et confirmer la suppression en appuyant sur *Supprimer*.



3. Pour éditer une phrase appuyez simplement sur celle-ci. Une fenêtre d'édition apparaît où vous pouvez modifier le texte de votre phrase, mais aussi l'image, l'audio et le multimédia connectés à votre celle-ci.
4. Pour enregistrer ces changements, appuyez simplement sur le bouton de retour <Predictable et sélectionnez *Oui* dans la fenêtre vous demandant si vous souhaitez enregistrer les modifications de cette phrase.

Ajouter une catégorie

1. Pour ajouter une catégorie, appuyer sur la touche *Phrases* dans vos touches rapides puis sur l'icône verte « + ».

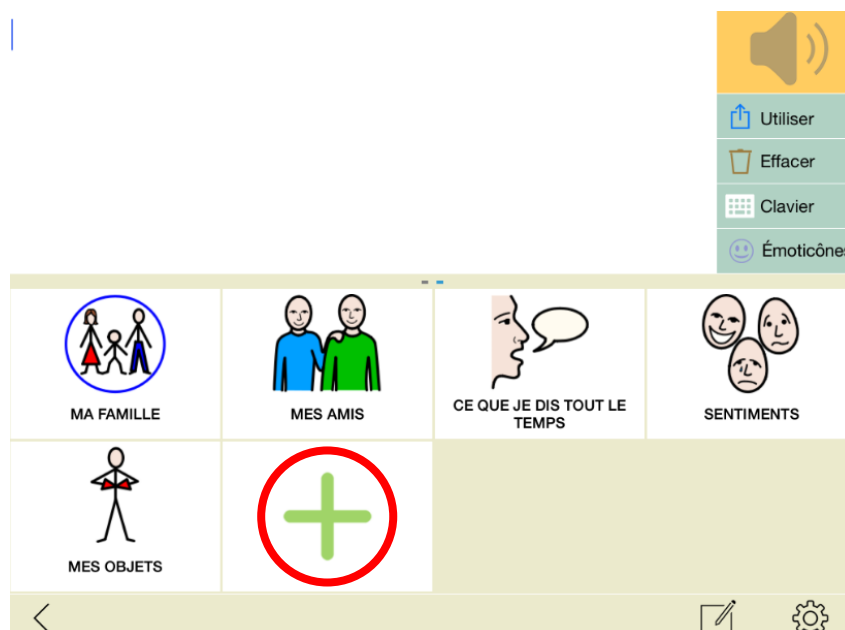

2. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez éditer le nom de votre catégorie et son image.

3. Pour enregistrer ces changements, appuyez simplement sur le bouton de retour <Predictable et sélectionnez *Oui* dans la fenêtre vous demandant si vous souhaitez enregistrer cette nouvelle catégorie.

Editer une catégorie


1. Pour éditer une catégorie appuyez sur le bouton ci-dessous (apparaissant en bas de votre écran lorsque vous êtes dans vos catégories) pour activer le mode d'édition:



2. Si vous souhaitez supprimer une catégorie appuyez sur le cercle rouge de la phrase à supprimer et confirmez la suppression en appuyant sur le bouton *Supprimer*. Si vous souhaitez éditer une catégorie, appuyez simplement sur celle-ci. Vous pouvez alors modifier le nom de votre catégorie ainsi que son image dans la fenêtre qui apparaît.
3. Pour enregistrer ces changements, appuyez simplement sur le bouton de retour <Predictable et sélectionnez *Oui* dans la fenêtre vous demandant si vous souhaitez enregistrer ces modifications.

Copier/Coller

Vous pouvez copier/coller du texte dans votre boîte de dialogue mais également dans ou depuis un document extérieur. Pour accéder à ces options appuyez sur la touche *Utiliser* dans vos touches rapides.

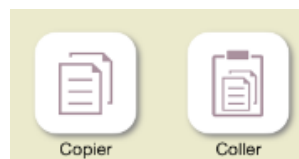


Email

Envoyez par email les messages que vous écrivez dans votre boîte de dialogue, directement depuis Predictable.

NB : Veuillez vérifier que votre appareil est bien connecté à internet via 3G/4G ou Wifi pour utiliser cette fonctionnalité. Vous ne pouvez pas recevoir d'email dans l'application Predictable.


Après avoir écrit votre message, appuyez sur la touche *Utiliser* en haut à droite de votre écran et sélectionnez l'icône *Email*.

Si vous êtes en mode *Accès Direct*, Predictable utilisera l'adresse email que vous avez configuré dans les réglages de votre appareil iOS.

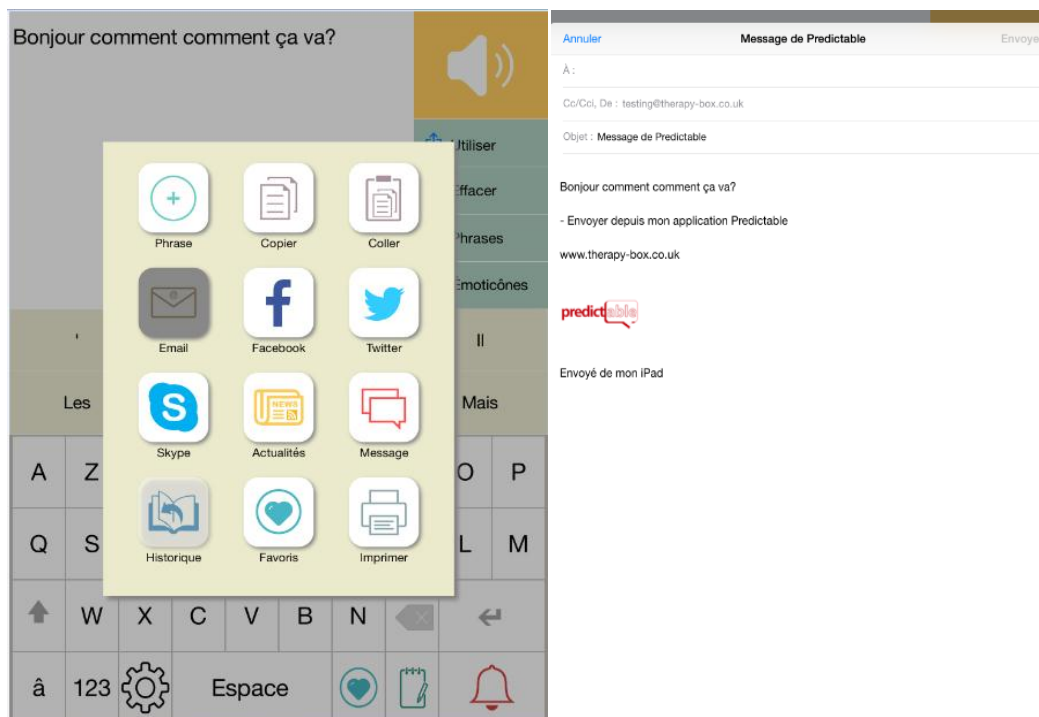


Si vous êtes en mode *Toucher N'importe Où* ou *Balayage*, veuillez configurer votre adresse email dans les réglages de l'application :

1. Pour cela veuillez-vous rendre dans les réglages de l'application, sélectionner l'onglet *Email* dans le menu à gauche de votre écran et appuyer sur la touche *Adresse de l'expéditeur*. Veuillez ensuite choisir votre fournisseur email. Si votre fournisseur n'apparaît pas dans la liste proposée, veuillez sélectionner *Autres*.

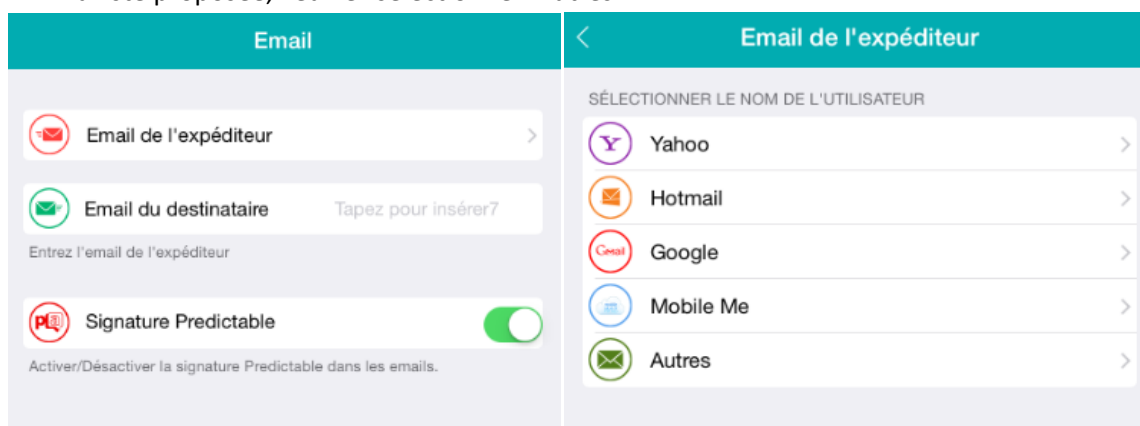

2. Entrez votre adresse email et votre mot de passe puis appuyez sur le bouton en face de *Choisir cet email adresse par default* pour enregistrer votre adresse.

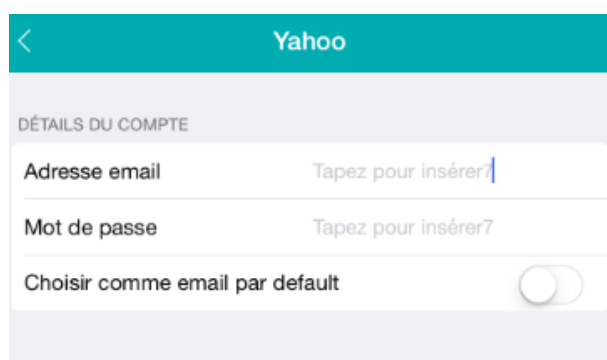

3. Vous pouvez également entrer l'adresse email de votre principal destinataire dans la case *Email du destinataire*, pour que votre email sont envoyé directement à cette personne sans avoir à chercher son adresse.

Email

Email de l'expéditeur

Email du destinataire

Signature Predictable

Tapez pour insérer7

Entrez l'email de l'expéditeur

Activer/Désactiver la signature Predictable dans les emails.

4. Retournez sur votre page d'accueil, appuyez sur la touche *Utiliser* en haut à droite de votre écran et sélectionnez l'icône *Email*. Une nouvelle page apparaît avec la liste des contacts enregistrés sur votre appareil. Si vous avez enregistré l'adresse de votre principal destinataire, cette adresse apparaîtra dans la première case. Vous pouvez chercher un contact en particulier avec grâce au clavier. Predictable liste les contacts présents dans vos réglages Apple, pour ajouter un contact veuillez vous rendre dans les réglages Apple.

Recherche contact

< Annuler

A	Z	E	R	T	Y	U	I	O	P
Q	S	D	F	G	H	J	K	L	M
↑	W	X	C	V	B	N	⌫	↩	
â	123	Espace					📍	🔔	

Les réseaux sociaux (Uniquement disponible en mode Accès Direct)

Vous pouvez mettre à jour votre statut Facebook ou poster un Tweet directement depuis Predictable, à partir du texte que vous entrez dans votre boîte de dialogue.


NB : Veuillez vérifier que votre appareil est bien connecté à internet via 3G/4G ou Wifi pour utiliser cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec le mode Accès Direct. Si vous êtes en mode « Toucher N'importe où » ou « Balayage » vous ne pouvez pas accéder à cette fonctionnalité.



Pour utiliser Facebook et Twitter depuis Predictable veuillez au préalable configurer vos comptes Facebook et Twitter dans les réglages de votre appareil iOS (appuyez sur l'icône réglages de votre appareil iOS et faites dérouler le menu à gauche de votre écran jusqu'à ce que vous voyez les options Facebook et Twitter).

Veuillez entrer le texte que vous souhaitez poster dans votre boîte de dialogue. Appuyez sur la touche *Utiliser* dans vos touches rapides et sélectionnez au choix l'icône *Facebook* ou *Twitter* pour poster votre message.

NB : Veuillez vous assurer d'avoir mis à jour votre appareil iOS pour éviter tout problème de comptabilité.

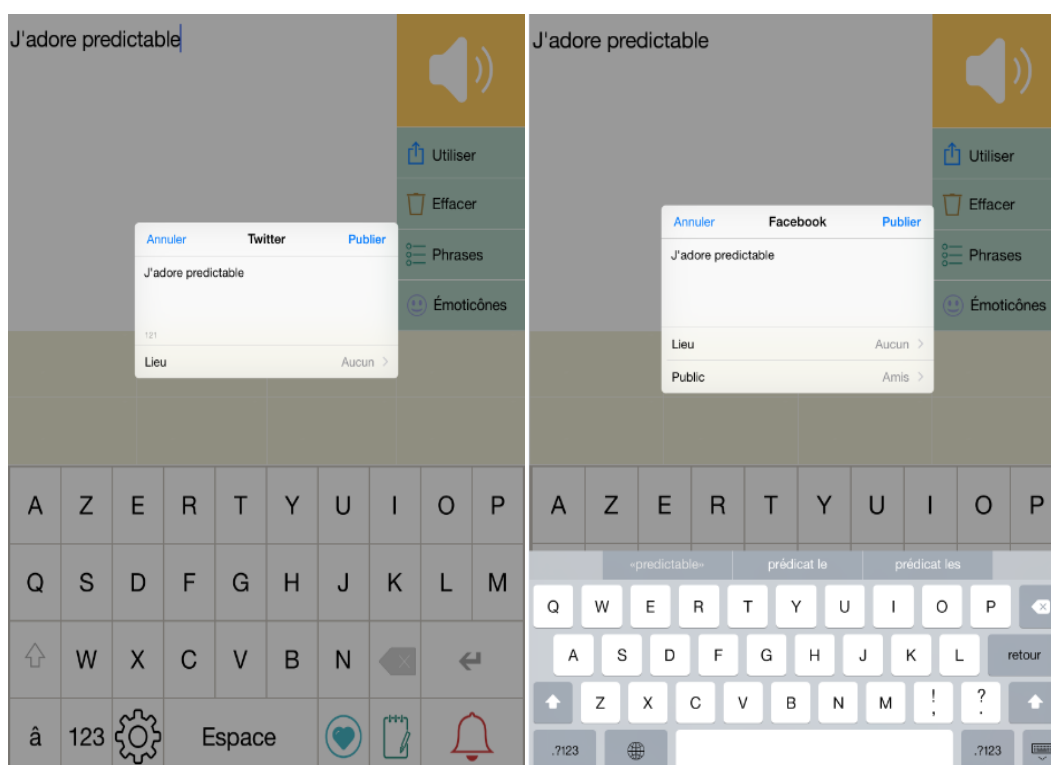

Skype (Uniquement disponible sur iPad et iPad mini)




Vous pouvez désormais passer vos appels Skype directement depuis Predictable.

NB : Veuillez vérifier que votre appareil est bien connecté à internet via 3G/4G ou Wifi pour utiliser cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité est indisponible sur iPhone ou iPod.


Pour utiliser Skype depuis Predictable vous devez avoir installé au préalable l'application Skype sur votre appareil et vous être connecté à votre compte.

Pour passer vos appels Skype depuis Predictable veuillez appuyer sur la touche *Utiliser* dans vos touches rapides et sélectionnez l'icône *Skype*.


1. Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, appuyez sur la case *Ajouter un contact*.
2. Dans la fenêtre qui apparaît commencez par entrer le nom de votre contact ainsi que son pseudo Skype.

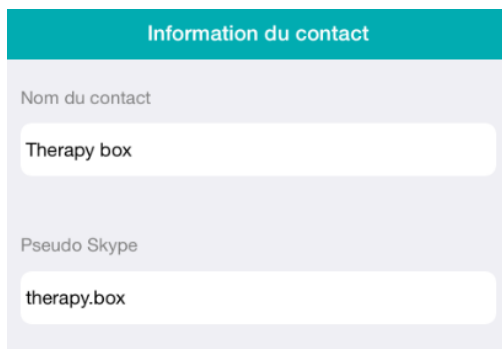A screenshot of a mobile app interface titled "Information du contact" in a teal header. Below the header, there are two input fields. The first field is labeled "Nom du contact" and contains the text "Therapy box". The second field is labeled "Pseudo Skype" and contains the text "therapy.box". The background of the form is light gray.

3. Dans l'onglet *Image* vous pouvez attribuer une image à votre contact en prenant directement une photo depuis l'appareil photo de votre appareil iOS, en choisissant une image dans la galerie de votre appareil iOS ou en sélectionnant une image dans la Bibliothèque de Predictable.

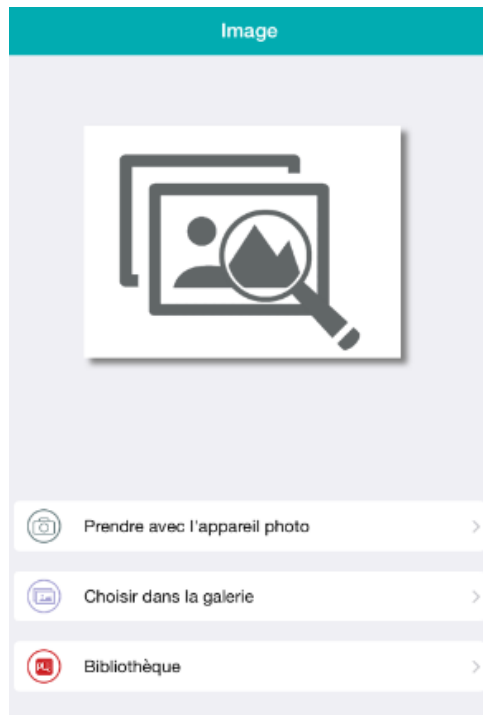


4. Dans l'onglet *Audio*, vous pouvez personnaliser le son que vous souhaitez entendre lorsque vous sélectionnez ce contact dans votre liste. Vous pouvez utiliser la voix que vous avez choisi dans les réglages de l'application, enregistrer un audio ou sélectionner un audio dans la bibliothèque Predictable.

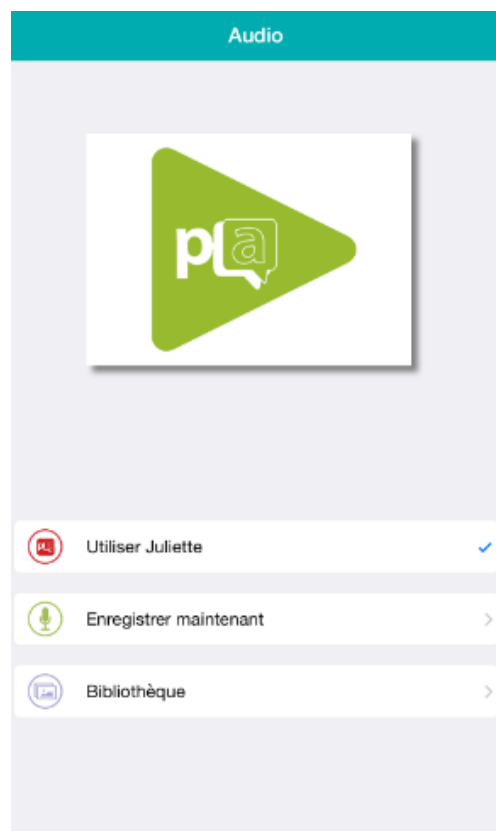

5. Pour sauvegarder votre contact, appuyez sur le bouton de retour <Predictable et sélectionnez *Oui* dans la fenêtre vous demandant si vous souhaitez enregistrer ce contact.

6. Dans la liste de vos contacts, veuillez appuyer sur le nom de la personne que vous souhaitez appeler. Vous serez alors redirigé vers l'application Skype où vous devrez sélectionner « Appel Vocal » dans la fenêtre qui apparaît.

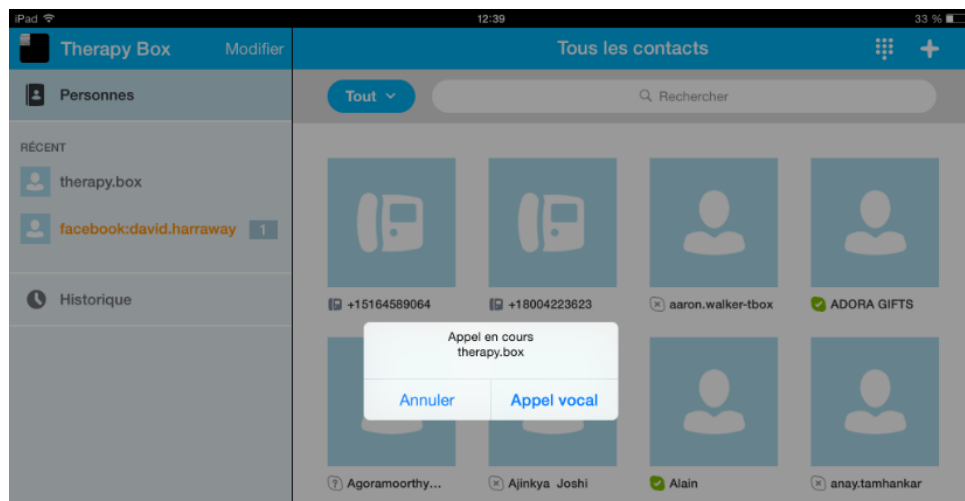

7. Lorsque votre contact accepte votre appel veuillez retourner dans l'application Predictable, cela se fait très rapidement en pressant deux fois sur le bouton Accueil de votre appareil iOS, et retournez dans l'application Predictable.
8. Entrez ensuite vos messages dans la boîte de dialogue et appuyez sur le bouton haut parleur pour que votre interlocuteur vous entende.

Actualités

Avec cette nouvelle fonctionnalité vous pouvez accéder aux dernières infos depuis l'application Predictable.

NB : Veuillez vérifier que votre appareil est bien connecté à internet via 3G/4G ou Wifi pour utiliser cette fonctionnalité.

Pour accéder à vos actualités, veuillez appuyer sur la touche *Utiliser* dans vos touches rapides et sélectionnez l'icône *Actualités*.

Vous pouvez envoyer le titre de vos informations dans votre boîte de dialogue en les sélectionnant dans la liste, entendre les titres en appuyant sur le petit haut parleur en face de chaque information ou lire la totalité de l'article en appuyant sur le petit livre en face de chaque information.



Vous pouvez choisir votre journal préféré dans les réglages de l'application. Pour cela appuyez sur l'onglet *Options* dans le menu à gauche de votre écran, puis sur la dernière touche *Actualités* et sélectionnez la chaîne info de votre choix.




Message (Uniquement disponible en mode Accès Direct)

Envoyez un message à une autre personne utilisant un appareil iOS, ou un SMS si vous utilisez Predictable sur iPhone.

NB : Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec le mode « Accès Direct ». Si vous êtes en mode « Toucher N'importe où » ou « Balayage » vous ne pouvez pas accéder à cette fonctionnalité.

Pour envoyer un message (SMS sur iPhone) : veuillez entrer votre message dans votre boîte de dialogue, appuyer sur la touche *Utiliser* dans vos touches rapides et sélectionner l'icône *Message* (SMS sur iPhone).

Dans la fenêtre qui apparaît veuillez entrer le nom de votre destinataire ou un numéro de téléphone et appuyez sur Envoyer.

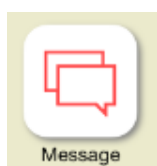

Historique

Cette fonctionnalité vous permet d'accéder rapidement aux mots et phrases que vous avez récemment utilisés dans votre boîte de dialogue (mots et phrases parlées ou publiées). Vous pouvez utiliser l'historique pour répéter un message que vous avez déjà utilisé auparavant mais également - si vous êtes un enseignant, thérapeute, ou travailleur social - pour analyser la façon dont l'utilisateur utilise Predictable.

Pour accéder à votre historique, veuillez appuyer sur la touche *Utiliser* dans vos touches rapides et sélectionner l'icône *Historique*.

Vous pouvez déplacer une phrase de votre historique dans une ou plusieurs de vos catégories. Pour cela appuyez sur le bouton *Editer* dans la barre du bas et dans la fenêtre qui apparaît sélectionnez une ou plusieurs catégories ou vous souhaitez sauvegarder votre phrase.

Pour supprimer une phrase de votre historique, appuyez sur le cercle rouge se situant devant cette phrase et confirmez en appuyant sur le bouton *Supprimer*. Pour supprimer tout l'historique appuyez sur le bouton de suppression (l'icône poubelle) se situant dans la barre du bas.

Vous pouvez désactiver l'Historique dans les réglages de Predictable pour des raisons de protection de la vie privée.



Imprimer

Si votre appareil est connecté à une imprimante Air Print, vous pouvez imprimer le texte de votre boîte de dialogue directement depuis Predictable.

Pour accéder à cette option, veuillez appuyer sur la touche *Utiliser* dans vos touches rapides et sélectionner l'icône *Imprimer*. Dans la fenêtre d'aperçu de l'impression qui apparaît, appuyez sur l'imprimante en haut à droite de votre écran pour sélectionner votre imprimante et le nombre de copies souhaitées.



Réglages

Pour accéder aux réglages de l'application, appuyez sur la touche réglage (rouage) se situant juste à gauche de la touche *Espace* du clavier.

Méthodes d'Accès

Predictable peut être utilisée avec trois différentes méthodes d'Accès : Accès Direct, Toucher N'importe Où et Balayage.



Accès Direct : c'est la méthode d'accès sélectionnée par défaut, elle permet d'utiliser l'application en touchant directement l'écran (mode normal de l'écran tactile).

Toucher N'importe Où : ce mode transforme l'écran de votre appareil iOS en contacteur géant balayant automatiquement les différentes parties et touches de l'application. Lorsque la partie ou la touche que vous souhaitez accéder (ex : Touches rapides ou Haut parleur) est en surbrillance tapez n'importe où sur l'écran pour sélectionner cette partie ou touche. Vous pouvez régler ce mode suivant vos besoins en ajustant la rapidité du balayage et le nombre de cycles souhaités avant que le balayage revienne à sa position initiale.

Balayage : contrôlez Predictable avec un ou deux contacteurs connectés(s) en Bluetooth à votre appareil iOS (les contacteurs ne pouvant pas être connectés directement aux terminaux Apple). Avec ce mode, les différentes parties et touches de l'application vont être balayées automatiquement (un contacteur) ou manuellement (deux contacteurs). Lorsque la partie ou la touche que vous souhaitez accéder (ex : Touches rapides ou Haut parleur) est en surbrillance, appuyez sur votre contacteur pour sélectionner cette partie ou touche. Vous pouvez régler ce mode suivant vos besoins en ajustant le type de balayage, sa rapidité et le nombre de cycles souhaités avant que le balayage revienne à sa position initiale.

Réglages de l'Accès direct

Délai de réponse : Activer le *Délai de réponse* va instaurer un délai d'attente avant que la prochaine tape sur l'écran puisse être prise en compte. Choisissez votre délai d'attente, allant de 1 à 10 secondes, en déplaçant le curseur.

Maintien de la touche : Activer le *Maintien de la touche* va instaurer un délai pendant lequel vous devez maintenir une touche appuyée avant que la sélection soit effective. Choisissez votre délai de maintien, allant de 1 à 10 secondes, en déplaçant le curseur.


Réglages des modes *Toucher N'importe Où* et *Balayage*

Type de balayage

Lorsque vous utilisez le mode balayage avec un contacteur, vous pouvez choisir le type de balayage souhaité entre balayage automatique et manuel :

Le balayage automatique, avec un contacteur, va automatiquement balayer les différentes sections de l'application. Appuyez sur le contacteur pour effectuer une sélection lorsque la section que vous souhaitez sélectionner est en surbrillance.

Le balayage manuel, qui nécessite deux contacteurs, vous permet de déplacer manuellement la zone de surbrillance en appuyant sur le premier contacteur et de sélectionner les touches en appuyant sur le deuxième.

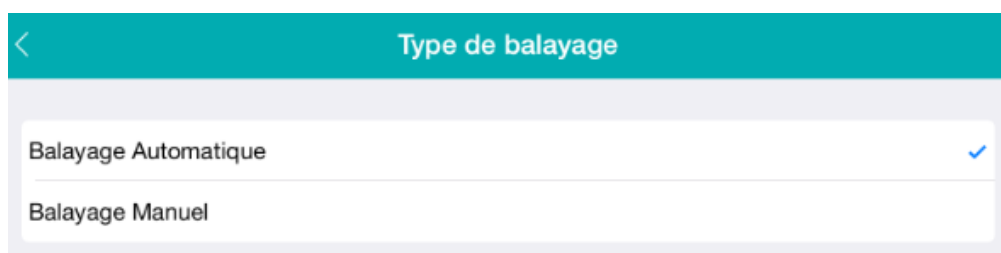

Type de balayage	
Balayage Automatique	✓
Balayage Manuel	

Rapidité du balayage

Choisissez la rapidité du balayage parmi 5 différentes vitesses : Très Rapide, Rapide, Normal, Lent, Très lent.



Rapidité du balayage	
Très Lent	
Lent	
Normal	✓
Rapide	
Très Rapide	

Arrêter le balayage


Choisissez combien de fois le balayage doit opérer avant de s'arrêter. Cette option peut être utile pour les personnes ayant besoin de plus de temps pour décider ou trouver leur sélection. Vous pouvez choisir de 1 à 5 cycles, ou un balayage illimité (Jamais).



Arrêter le balayage	
Après 1 cycle	
Après 2 cycles	
Après 3 cycles	✓
Après 5 cycles	
Jamais	

Sortie Rapide – Activer/Désactiver

Lorsque que vous êtes en mode *Toucher N'importe Où* ou *Balayage*, vous pouvez rapidement sortir de ces modes et revenir au mode *Accès Direct* par l'intermédiaire du bouton de Sortie Rapide. Ce bouton apparait par défaut en bas à gauche de la boîte de dialogue, mais vous pouvez le déplacer sur l'emplacement de votre choix. Un message apparait lorsque vous appuyez sur ce bouton. Sélectionnez *OK* pour revenir en mode *Accès Direct*. Si le bouton *Ok* n'est pas sélectionné le message disparaîtra et le balayage continuera.

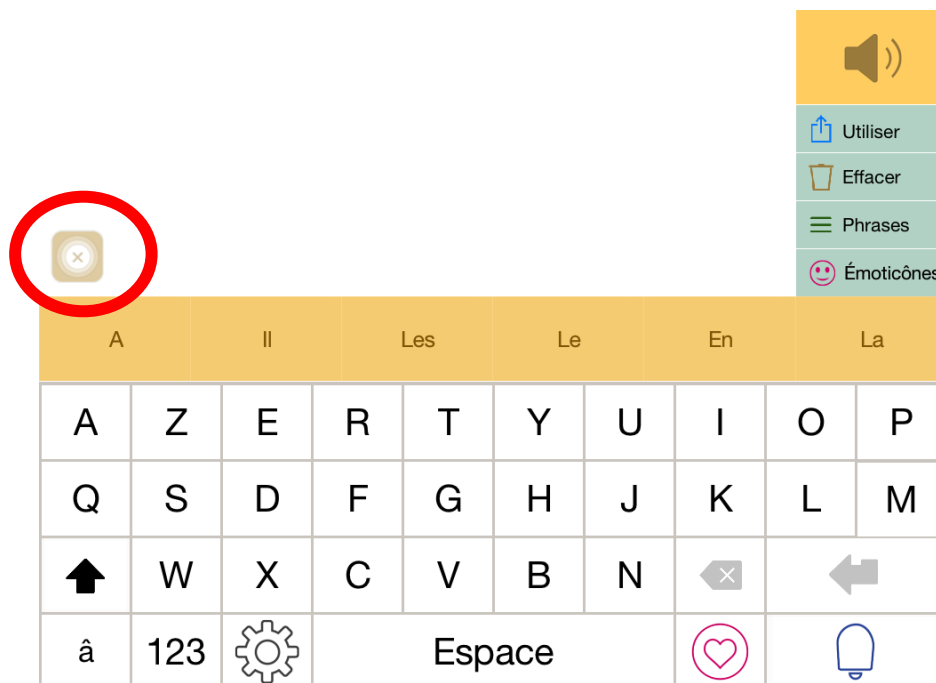


Connecter votre contacteur et interface Bluetooth à votre appareil iOS

1. Accédez aux réglages de votre appareil iOS en appuyant sur l'icône suivante:



2. Dans le menu à gauche de vos réglages, sélectionnez *Bluetooth* et activez votre Bluetooth.

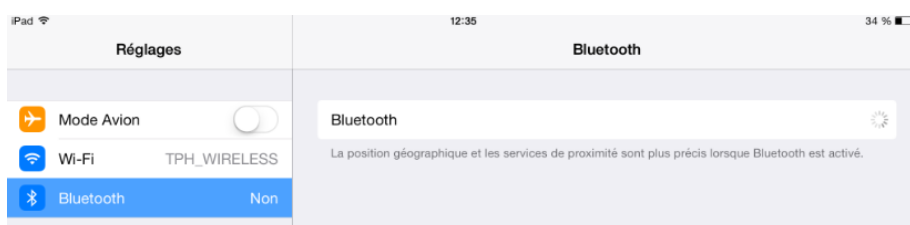


3. Branchez votre contacteur à votre interface Bluetooth.



4. Allumez votre interface Bluetooth en appuyant sur le petit bouton rouge pendant 1 seconde. La diode clignotera trois fois avant de se connecter à votre appareil iOS, puis clignotera orange lorsque la connexion est en cours et alternativement vert et rouge lorsque la connexion est complète.



5. Dans les réglages Bluetooth de votre appareil iOS, sélectionnez le nom de votre interface et attendez que le message « Connecté » s'affiche.

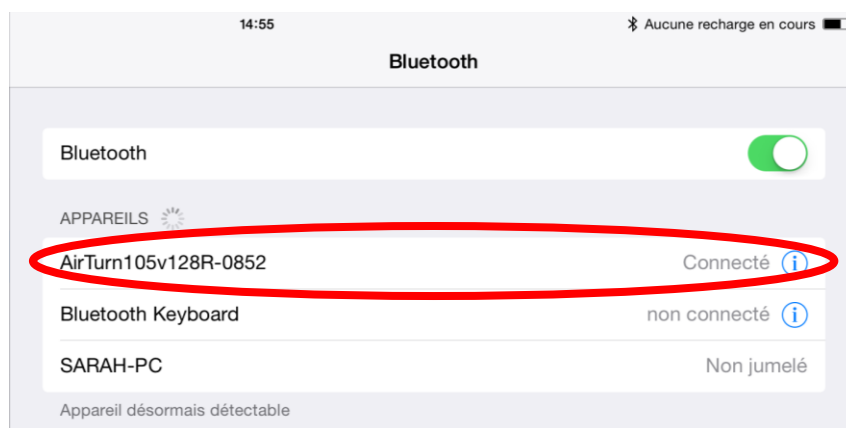

Si la connexion échoue, appuyez sur l'icône information en face de votre interface puis sur la touche « Oublier cet appareil » et essayez à nouveau. Veuillez noter que la première connexion peut prendre jusqu'à 30 secondes.

Pour réinitialiser la connexion (ex: si vous souhaitez connecter votre interface Bluetooth à un autre appareil), appuyez et maintenez le bouton rouge jusqu'à ce que la diode clignote alternativement vert et rouge.


Support Audio

Simple tape pour sélection – Activer/Désactiver

Activez cette option pour entendre le nom des touches sur lesquelles vous appuyez. La sélection de la touche s'effectuera en même temps que sa prononciation.


Double tape pour sélection – Activer/Désactiver

Activez cette option pour entendre d'abord le nom des touches lorsque vous appuyez une fois sur celles-ci. Pour confirmer la sélection d'une touche veuillez taper deux fois dessus. (Cette option est uniquement disponible lorsque *Simple tape pour sélection* est activée).

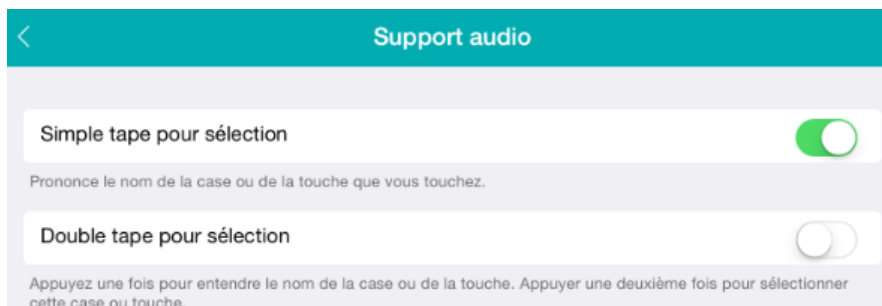

Voix

Vous pouvez choisir votre voix parmi 13 voix Nuance de haute qualité ou la voix iOS de votre appareil.

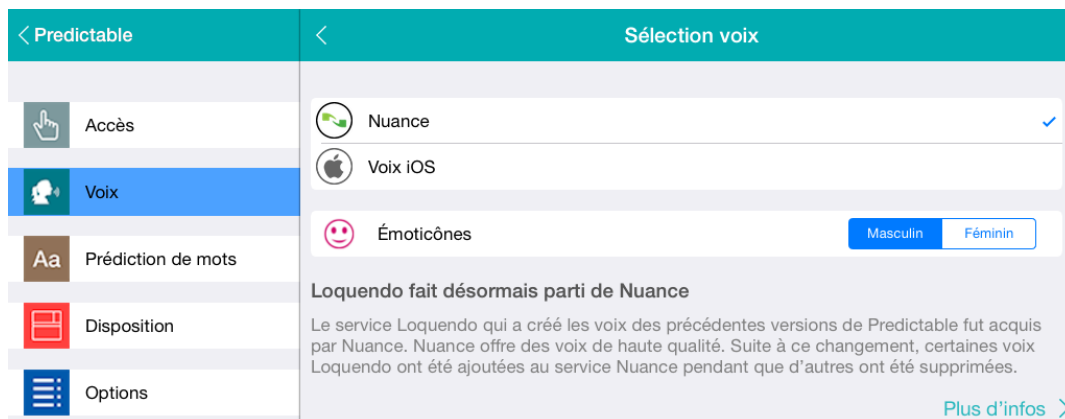


Veuillez simplement sélectionner la voix de votre choix dans les réglages de Predictable et retourner sur la page d'accueil pour utiliser la voix choisie.

Vous pouvez personnaliser les voix Nuances en modifiant le ton et le débit de la voix que vous avez sélectionné (la modification du ton n'est pas disponible pour la voix iOS).



Options de prononciation

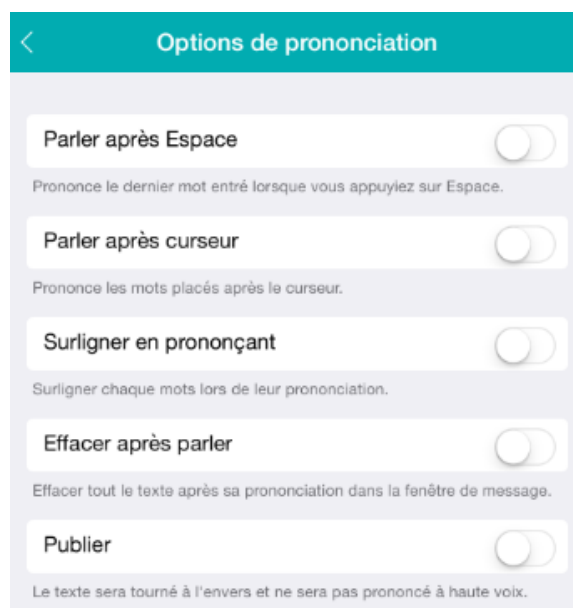

Parler après Espace – Activer/Désactiver

Lorsque vous sélectionnez un mot dans la barre de prédiction ou écrivez un mot depuis le clavier et que vous appuyez sur la barre d'espace, ce mot sera automatiquement prononcé sans avoir à toucher le haut parleur.

Parler après curseur - Activer/Désactiver

Placez le curseur devant n'importe quel mot dans la boîte de dialogue pour que la prononciation commence à cet emplacement précis lorsque vous appuyez sur le haut parleur.

Surligner en prononçant - Activer/Désactiver

Tous les mots présents dans la boîte de dialogue seront surlignés un par un lorsque vous appuierez sur le haut parleur.

Effacer après parler - Activer/Désactiver

Efface automatiquement tout le texte présent dans la boîte de dialogue lorsque le message est prononcé dans sa totalité.

Publier - Activer/Désactiver


Cette option remplace le bouton haut parleur par un bouton de publication. Lorsque vous appuyez sur ce bouton le texte entré dans la boîte de dialogue ne sera pas prononcé, mais renversé de façon à ce que la personne assise en face de vous puisse lire votre message. Activez cette option pour discuter discrètement et pour vos conversations privées.

Prédiction de mots

Mots auto-appris

Predictable apprend les nouveaux mots que vous utilisez et qui ne sont pas présents dans le dictionnaire. Ces nouveaux mots sont appris après trois répétitions et peuvent être supprimés si

vous le souhaitez dans les réglages de l'appareil. Pour appuyez sur la touche Mots auto-appris dans le menu *Prédictions de mots* de vos réglages.

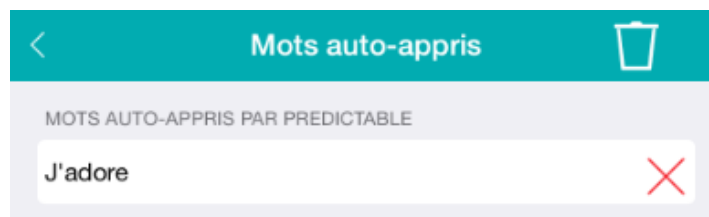

Mots personnalisés (modification prononciation et création d'abréviations)

Parfois les nouveaux mots que vous ajoutez ou même les mots existants nécessitent une prononciation différente. Pour personnaliser la prononciation de ces mots appuyez sur le bouton Prononciation de l'option *Mots personnalisés* du menu *Prédictions de mots*.

Entrez d'abord le texte à afficher dans la boîte de dialogue, puis la prononciation souhaitée pour ce mot. Appuyez sur le bouton lecture pour vérifier que cette prononciation vous convient. Et appuyez sur *Sauvegarder*. Vous pouvez ajouter une abréviation à votre mot personnalisé. Tapez cette abréviation dans votre clavier puis appuyez sur la touche *Espace*, le texte choisi pour l'affichage apparaîtra alors dans la boîte de dialogue avec sa prononciation personnalisée.




Pour créer une abréviation, appuyez sur la touche *Abréviation*. Entrez un ou plusieurs mots dans la case *Affichage du texte*, par exemple « Je m'appelle Sarah », puis entrez l'abréviation choisit dans le case *Abréviation*. Pour utiliser cette abréviation, écrivez simplement votre abréviation depuis le clavier, suivit de la touche *Espace* : votre texte à afficher apparaîtra alors en entier dans la boîte de dialogue.




Support à la Dyslexie – Activer/Désactiver

Activez cette option pour que la barre de prédiction de mots détecte les erreurs d'orthographe courantes due à la dyslexie et prédise ces mots avec leur correcte orthographe.

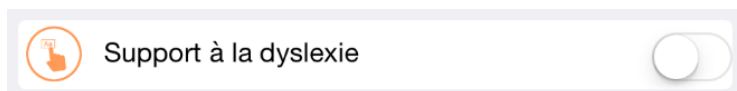

Prédiction des mots en gras - Activer/Désactiver

Activez cette option pour que les mots de la bande de prédiction apparaissent en gras.

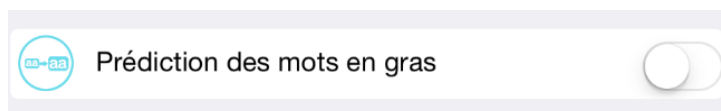


Disposition

Vous pouvez personnaliser les options apparaissant dans les touches rapides en ne sélectionnant que les options que vous utilisez le plus souvent.


Personnalisez vos touches rapides

Pour personnaliser vos touches rapides ouvrez l'option *Sélection touches rapides* dans le menu *Disposition* de vos réglages. Sélectionnez parmi les trois premières options si vous souhaitez personnaliser les options de la touche *Utiliser*, *Supprimer* ou *Emoticônes*. Sélectionnez ensuite les options que vous souhaitez voir apparaître.

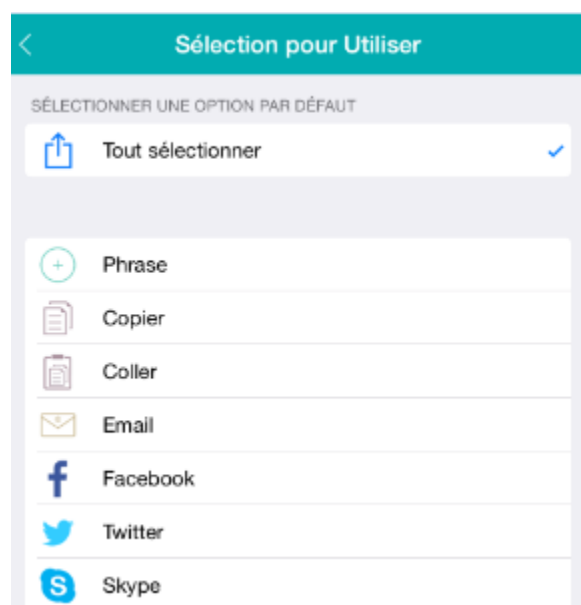


Accès aux émoticônes – Activer/Désactiver

Activer ou désactiver la touche *Emoticônes* dans vos touches rapides.

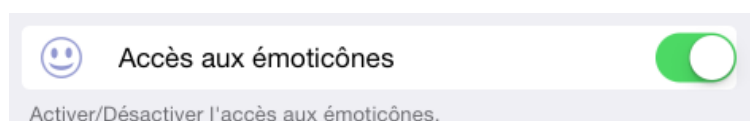


Emplacement des touches rapides – Droite/Gauche

Suivant que vous soyez gaucher ou droitier (ou suivant vos préférences) vous pouvez choisir de positionner vos touches rapides à droite ou à gauche de votre écran.

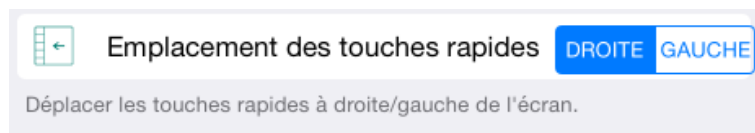

Thème

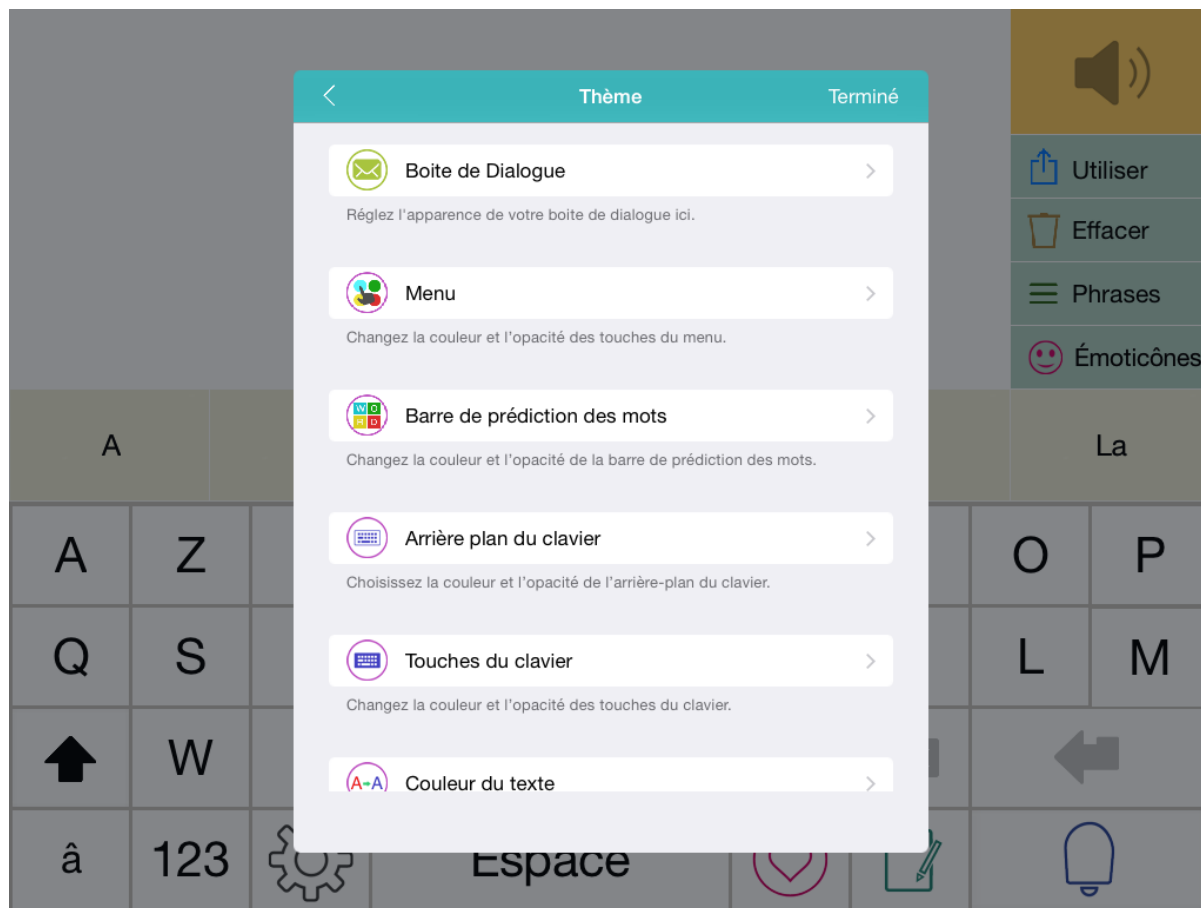

L'option *Thème* vous permet de personnaliser l'application avec différentes couleurs et opacités:

Boite de dialogue: modifiez la couleur et l'opacité de la boîte de dialogue, ajustez la taille du texte affiché dans celle-ci avec une police d'écriture noire ou blanche.

Menu: modifiez la couleur et l'opacité du menu rapide où sont affichés les options *Utiliser*, *Effacer*, *Phrases* et *Émoticônes*.

Barre de prédiction des mots: modifiez la couleur et l'opacité de la barre de prédiction des mots et ajustez la taille du texte affiché dans celle-ci.

Arrière plan du clavier: modifiez la couleur et l'opacité de l'arrière plan du clavier. Ce changement affectera aussi l'arrière plan de vos catégories et phrases.

Touches du clavier: modifiez la couleur et l'opacité des touches du clavier. Ce changement affectera aussi les cases de vos catégories et de vos phrases.

Couleur du texte: modifiez la couleur et l'opacité du texte. Ce changement affectera le texte du menu rapide, des mots prédits, du clavier, mais aussi le texte de vos catégories et de vos phrases.

Thème par défaut: pour restaurer les couleurs et opacités par défaut de l'application.

Contraste élevé: pour les personnes souffrant de troubles visuels, cette option transforme l'application (y compris les réglages) en noir et blanc pour afficher un contraste élevé.

Inverser les couleurs: Instructions pour activer l'option Apple „Inverser les couleurs“ depuis les réglages de votre appareil.


Nuance de gris: Instructions pour activer l'option Apple „Nuance de Gris“ depuis les réglages de votre appareil (uniquement sur iOS8).

Options

D'autres options peuvent être activées, désactivées ou personnalisées dans le menu *Options* de vos réglages.


Tonalité des touches – Activer/Désactiver

Activez ou désactivez la tonalité des touches dans l'application.

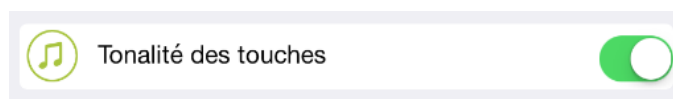


Sauvegardez l'historique – Activer/Désactiver

Activez ou désactivez la sauvegarde des mots que vous prononcez dans votre historique.

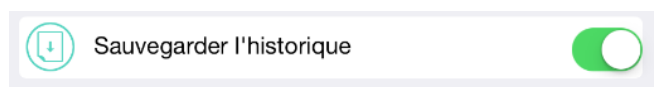

Sonnerie d'alerte


Choisissez le son de votre touche *Alerte* parmi une large sélection.

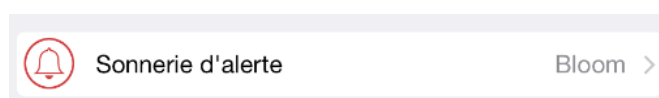

Vous pouvez également enregistrer votre propre sonnerie d'alerte en appuyant sur la touche *Personnalisez la sonnerie d'alerte*.


Parler et Afficher Favoris – Activer/Désactiver

Cette option vous permet de choisir si vous souhaitez envoyer dans la boîte de dialogue le texte des phrases enregistrées dans vos Favoris. En désactivant cette option vos phrases favorites seront juste prononcées.

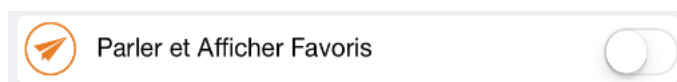

Délais des messages – Activer/Désactiver

Choisissez pendant combien de temps les messages d’alerte de Predictable restent à l’écran avant de disparaître.

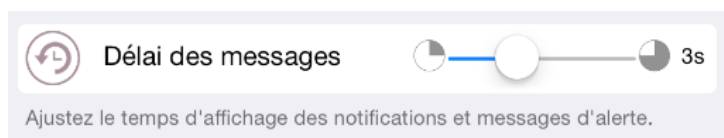

Clavier

Réglez et personnalisez votre clavier dans le menu *Clavier* de vos réglages.

Vous pouvez choisir d’afficher ou non les touches WritePad, Favoris et Sonnerie dans l’option *Affichage des touches*.




Choisissez entre le clavier QWERTY et AZERTY dans l’option *Type de clavier*.




Clavier en capital – Activer/Désactiver

Activez cette option pour afficher les lettres de votre clavier en majuscule. Désactivez-la pour afficher les lettres en minuscule.

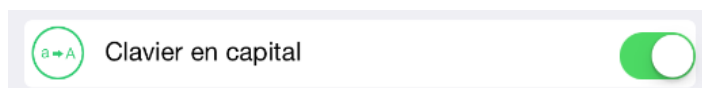

Clavier en gras – Activer/Désactiver

Activez cette option pour que les lettres de votre clavier apparaissent en gras.

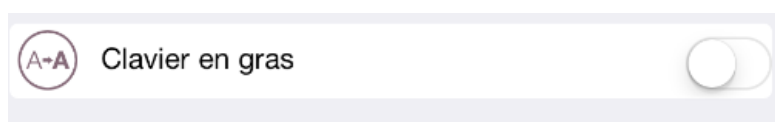


Sauvegarde

Vous pouvez sauvegarder tout le contenu et les réglages de Predictable. Nous vous recommandons d'effectuer régulièrement une sauvegarde en cas de perte, vol ou problème de fonctionnement de votre appareil iOS.


Créer une sauvegarde

Veillez d'abord entrer le nom de votre sauvegarde dans la case *Créez Sauvegarde* et appuyer sur le bouton de validation à droite de cette case pour créer votre fichier de sauvegarde.

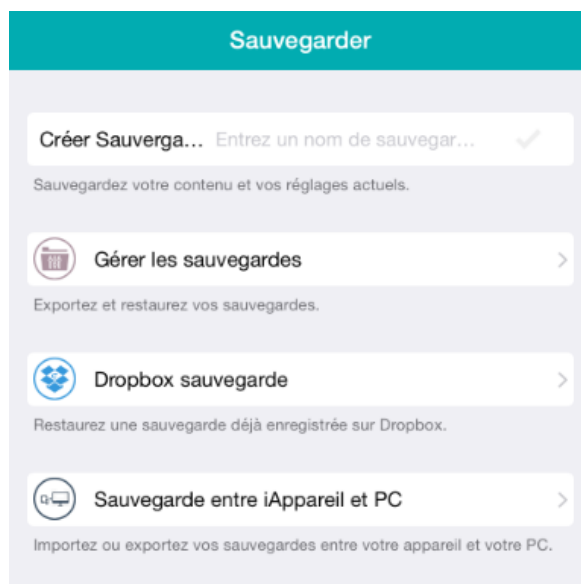

Gérer vos sauvegarde

Dans l'option *Gérer les sauvegardes*, vous pouvez voir toutes les sauvegardes que vous avez créées.

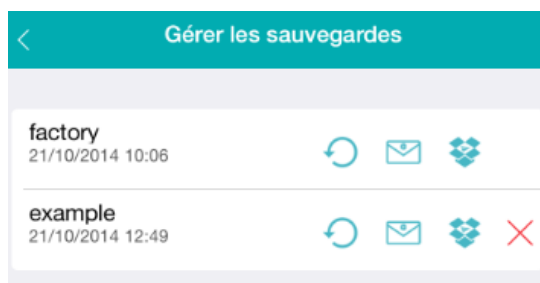

Pour restaurer une sauvegarde appuyez sur la flèche antihoraire.



Pour envoyer une copie de votre sauvegarde par email appuyez sur l'icône email (taille du fichier de sauvegarde limité à 20 Mo).



Envoyez votre fichier de sauvegarde sur votre compte Dropbox en appuyant sur l'icône Dropbox. Afin d'utiliser cette option, veuillez avoir créé un compte Dropbox et installé l'application Dropbox sur votre appareil iOS.




Appuyez sur l'icône de suppression pour supprimer votre sauvegarde.




Exporter/Importer vos sauvegardes

Vous pouvez également importer une sauvegarde Predictable dans l'application en appuyant sur la touche *Dropbox Sauvegarde*.

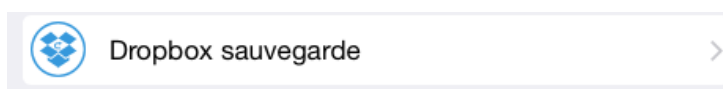

Avec l'option *Sauvegarde entre iAppareil et PC*, vous pouvez envoyer une sauvegarde depuis Predictable sur votre ordinateur ou importer une sauvegarde depuis votre ordinateur dans Predictable juste en connectant votre appareil iOS et votre ordinateur sur le même réseau Wifi.

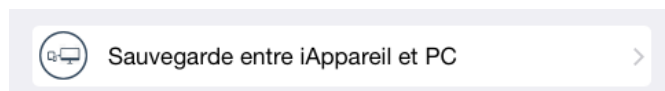

Vous pouvez restaurer vos sauvegardes sur un autre iPad, iPhone ou iPod.

Pour plus d'informations

A propos de Predictable

Manuel d'utilisation – Cette option vous permet d'ouvrir une version PDF du manuel d'utilisation directement dans votre navigateur internet. Vous pouvez ainsi accéder facilement aux explications des fonctionnalités de Predictable.

Donner votre avis – Cette option ouvrira directement votre iTunes sur la page de Predictable où vous pourrez évaluer l'application, aidant ainsi d'autres personnes à prendre une décision avant l'achat de Predictable.

Demande d'assistance – Cette option ouvrira un email déjà adressé à l'équipe du service client de Predictable. Si vous avez un problème ou avez besoin de conseils vous pouvez ainsi contacter directement l'équipe Therapy Box.

Signaler un bug - Cette option ouvrira un email déjà adressé à l'équipe du service client de Predictable. Si vous avez un problème avec Predictable n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondront dans les plus brefs délais.

A propos de Therapy Box

Qui sommes-nous – Appuyez sur le lien *Visitez notre site Internet* pour ouvrir directement notre site www.therapy-box.co.uk dans votre navigateur.

Nos autres applications – Découvrez toutes les applications de Therapy Box disponibles sur l'App store.

Notre agence de développement – Appuyez sur le lien *Visitez notre agence* pour en savoir plus sur notre service de développement d'application.

Suivez-nous

Pour en savoir plus sur Predictable, et vous tenir informé des promotions et actualités de Therapy Box veuillez-nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube et vous inscrire à nos newsletters.